

... od vývoje po realizaci



Production of materials testing equipment and automation

Padostroje pro rázové zkoušky volným pádem
řada DP.2 - DPFest do 3000J VP



Made in Czech Republic



Production of materials testing equipment and automation

Padostroje pro rázové zkoušky řada DP.2 DPFest do 3000J Volný pád

... od vývoje po realizaci

Základní popis


Nízkokapacitní padostroje firmy LABORTECH jsou určeny k testování a vyhodnocování lomových ploch materiálů a produktů **volně padajícím závažím – řada VP**. Zkušební metoda je popsána jako zkouška pádové hmotnosti v následujících normách: EN ISO 6603-2, ISO 7765-2, EN ISO 179-1/-2, ISO 18352, EN 6038, ASTM D3763, ASTM D5628, ASTM D7136M, ASTM D7192, ASTM D2444, Airbus AITM 1.0010, Boeing BSS 7260, DIN 65561.

Hlavní výhody, funkce a vlastnosti

- Robustní vertikální zkušební rám s vysokou tuhostí, životností, vhodným ergonomickým uspořádáním a bezúdržbovým provozem.
- Modulární systém s různými modifikacemi stroje
- Unikátní kombinace magnetického systému ochrany ve spolupráci s elektro-hydraulickým zařízením ELHY umožňuje optimalizaci odskoku kladiva.
- Plynule nastavitelná výška pádu s automatickým zdvihem pomocí AC motoru a měniče.
- Průběžná kontrola správné hmotnosti nárazového závaží
- Účinné tlumiče rázu pro bezpečnou a spolehlivou eliminaci zbytkové energie
- Ochranný bezpečnostní kryt s elektrickým jištěním. Vysoká bezpečnost dle EN ISO 13849-1/2
- Flexibilní, rychlé a jednoduché přizpůsobení opěry dle zkoušeného vzorků včetně centrování
- Systém rychlé výměny břitů zajišťuje jednoduchou a pohodlnou obsluhu pro uživatele i v náročných průmyslových podmínkách
- Detekce provozních chyb a jejich zobrazení v programu
- Příprava pro použití různých zkušebních opěr a břitů
- Integrovaný elektrický dopravník pro sběr přeražených vzorků s účinností až 95% určených k dalšímu použití (metalografický rozbor atd.)

Řízení a ovládání stroje

- Centrálně umístěné ovládací prvky zabezpečující jednoduché ovládání a zkoušení na zkušebním systému
- Elektronika a řízení stroje integrované v centrální skříni Rittal, která je součástí stroje s bezpečnostním software DROPTest-S-xxx instalovaným v bezpečnostním PLC Simatic S7 s elektromechanickým blokováním a možností využití jednotlivých modulů.
- Ovládání dotykového displeje s elektronickým zobrazením poklesu výšky, klesající energie, hmotnost pádu a nárazová rychlost.

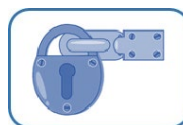

Požadavky na bezpečnost a aktualizace

- Rázové vysokokapacitní padostroje firmy LABORTECH na základě své koncepce a struktury jsou v souladu s bezpečností se směrnicí o bezpečnosti evropských strojů (89/392 / EHS a 91/368 / EHS - bezpečnost strojního zařízení
- Certifikovaný systém bezpečnostního okruhu dle TÜV s řízením a hlídání bezpečnosti.
- Vysoká bezpečnost v souladu dle EN ISO 13849-1/2
- Všechny bezpečnostní systémy jsou dvojitě jištěné
- Průběžná kontrola ochranných bezpečnostních krytů a dveří v souladu s novými bezpečnostními funkcemi.

Rozšíření strojů

- Možnost rozšíření padostrojů o **instrumentaci** s měřením síly a dopadové dráhy o elektroniku s rychlostí měření 4MHz, digitální řídicí a měřicí jednotka SPEED a intuitivním a výkonným software DROPTest - BASIS s příslušnými moduly.
- Rozšíření padostrojů o **chladicí systémy** s maximální teplotou chlazení do – 90°C
- Rozšíření strojů o **robotické systémy** s možností autonomního ovládání celého systému bez lidského zásahu.

Vlastnosti software DROPTest - BASIS

DROPTest je nedílnou součástí všech vertikálních rázových strojů typu LabTest DP, dodávaných firmou LABORTECH. Tento software vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu zkoušení ve vašich zkušebnách a testovacích laboratořích. Můžete zefektivnit, zpřesnit a zrychlit provádění vašich testů a přizpůsobit své testování prostředí tak, aby bylo snadné pro provozovatele měření mechanických vlastností materiálů metodou volně padajícího závaží, bez ohledu na jejich dovednosti. Níže najdete v několika bodech základní vlastnosti:



- Software určený pro zkoušku padajícím závažím.
- Editovatelné typy vzorků a zkušebních norem včetně modifikace názvu položek.
- Grafická evidence přípravků k jednotlivým normám a pracovním postupům
- Digitální zobrazování všech aktuálních hodnot.
- Ukládání naměřených dat do databáze s možností filtrace podle definice, zakázky, data atd.
- Rozsáhlý kalibrační mód již ve standardu
- Automatické časování chlazení před zkoušením dle EN
- ISO 148-1 a ASTM E23.
- Přenos dat z teplotní komory, teploměru atd.
- Multijazyčná verze (ČJ, EN, POL, RU, ESP atd.)
- Tisk protokolu ve formátu PDF
- Export dat do CSV – BASIS, nebo do MY SQL a MS SQL
- Časově neomezená licence
- Instalace na jakýkoli počítač bez použití licence atd.

Záruční a pozáruční servis


- U každého, námi dodávaného padostroje garantujeme záruční a pozáruční servis. **ODBORNOST, PŘESNOST a RYCHLOST**, to je naše priorita.
- Každý zákazník si může vybrat: Standardní servis, Servis 24 nebo LABWEBServis 24.



Production of materials testing
equipment and automation


Padstroje pro rázové zkoušky řada DP.2 DPFest do 3000J Volný pád

... od vývoje po realizaci

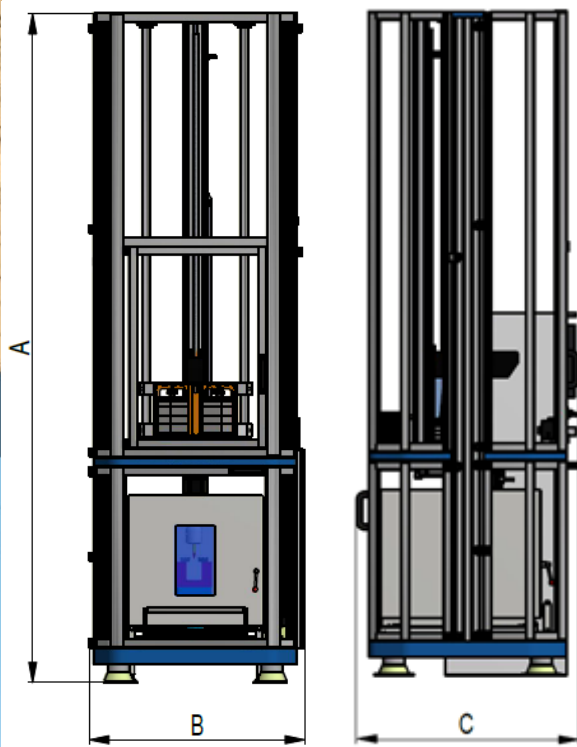

Technická data	Jednotky	DPFest 200VP	DPFest 400VP	DPFest 600VP	DPFest 800VP	DPFest 1000VP	DPFest 2000VP
Rozsah měření	J	0,3 - 294	0,3 - 405	0,3 - 588	0,3 - 757	2,5 - 882	2,5 - 1814
Nárazová rychlost	m/s	0,7 - 4,42	0,7 – 4,646	0,7- 6,26	0,7- 4,645	1 - 7,67	1 - 8,52
Rozsah výšky pádu	mm	30 - 1000	37,5 - 1100	30 - 2000	70 - 1100	30 - 3000	50 - 3700
Přesnost najetí na polohu	mm	0,5					
Rozsah použitého závaží	kg	0,5 - 30	0,5 – 37,5	0,5 - 35	0,5 - 35	0,5 - 35	0,5 - 50
Třída přesnosti závaží	%	dle OIML					
Hmotnost ¹	kg	362	396	414	498	498	616
Barevná kombinace	RAL	1015, 5015					
Rozměry (bez akceleraátoru)							
Výška stroje (A)	mm	2620	2620	3650	2650	4680	5650
Šířka stroje (B)	mm	800	800	800	800	800	900
Hloubka stroje (C)	mm	570	570	570	570	570	670
Podmínky prostředí							
Teplota pracovního prostředí	°C	10 to 35					
Skladovací teplota	°C	-35 to 55					
Vlhkost pracovního prostředí	%	< 90					
Hlučnost ²	dB	< 65					
Elektrické připojení							
Napájecí napětí	V	230... 240/50-60Hz					
Jištění stroje	A	16					
Příkon stroje (bez příslušenství)	VA	820	820	820	1000	1000	2000

¹ Hmotnost stroje je bez příslušenství. ² Hlučnost stroje je měřena 1 m od zkušebního stroje.

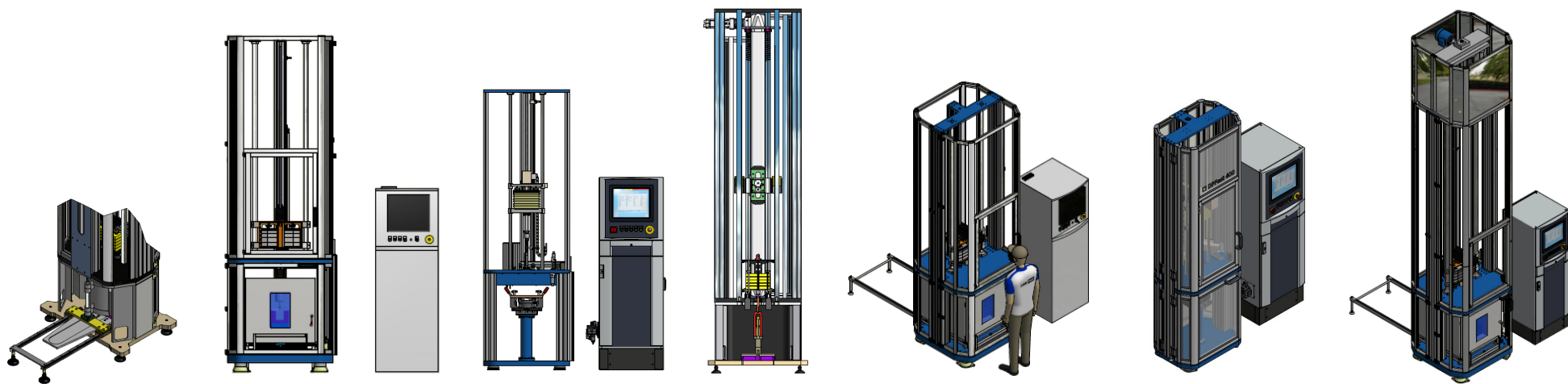

Labor Tech

Production of materials testing
equipment and automation

**LABORTECH ve
světě**

... od vývoje po realizaci

LABORTECH ve světě



Kontakt:

LABORTECH s.r.o.

Rolnická 130a, 747 05 Opava, Česká republika

Tel: +420 553 731 956, +420 553 668 648

E-mail: info@labortech.cz

Web: www.labortech.cz

GPS: 49°57'05.1"N

17°54'04.4"E

LABORTECH TRADING s.r.o.

Areál VVÚD Praha, Na Florenci 1686/9, 111 71 PRAHA 1, Česká republika

Tel: +420 731 656 723, +420 724 020 052

E-mail: trading@labortech.cz

Web: www.labortech.eu

Najdete nás také na sociálních a multimediálních sítích:

[Youtube](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#)

